



[www.imv-technologies.com](http://www.imv-technologies.com)

# El sistema GT DEEP™

La inseminación post-cervical con IMV



Tecnología **GT DEEP™**

- Probada desde 1999
- Maximiza el potencial genético
- Fácil de usar
- Un sistema completo desde el envasado automático hasta la inseminación
- Trazabilidad total



# El sistema GT DEEP™


## La inseminación post-cervical con IMV



### La tecnología GT DEEP

Pionero de la inseminación artificial post-cervical (IAPC) porcina, IMV ha desarrollado un sistema total de inseminación post-cervical, desde el envasado hasta la inseminación. Esta técnica, patentada en 1985, permite la introducción del semen 20 cm más allá del cérvix, limitando la pérdida de espermatozoides.

Gracias a su experiencia, know-how y a sus muchos colaboradores, el sistema de IAPC de IMV Technologies ha llegado a ser un estándar a nivel mundial.

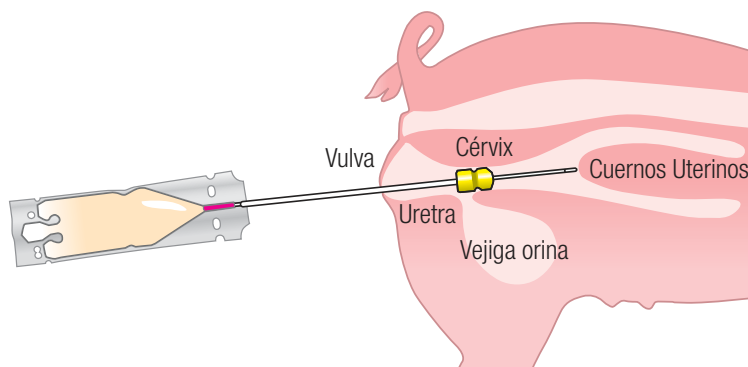

# Bolsas GTB

## Acople perfecto con cualquier tipo de catéter

- Conexión directa, sin necesidad de conectores adicionales
- Conexión a prueba de fugas

## Condiciones de conservación ideales

- Film de doble capa de material garantizado como no-espermicida
- Aumenta el tiempo de conservación (almacenamiento superficie aplanada)
- Punta sanitaria, protegida hasta el momento de la IA

## Compacta y práctica


- Ahorra un 15% de espacio
- Fácil apertura, sin necesidad de herramienta alguna

### Bolsas GTB<sup>1</sup>

Capacidad: hasta 90 ml  
Diseño optimizado para la inseminación tradicional y los sistemas de auto-inseminación

### Bolsas Mini GTB<sup>2</sup>


Capacidad: hasta 40 ml  
Diseño especial para la IAPC  
Permite el vaciado de la dosis mediante presión

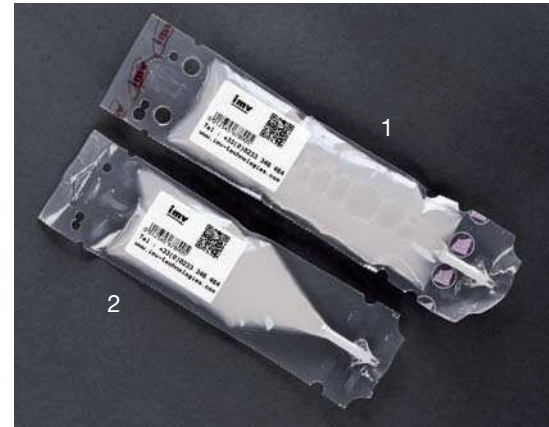

# Catéteres IMV

Cómo líder en este ámbito, IMV Technologies ha desarrollado un gama de catéteres para la IAPC que combinan la facilidad de uso, con la eficiencia y la calidad en su fabricación.

- Atraumático: la punta del catéter de IAPC es completamente suave, sin asperezas.
- Punta blanca para detectar la presencia de sangre
- Disponible con o sin conector

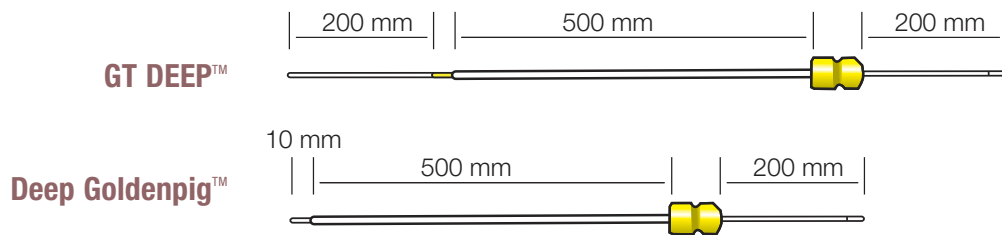

# Envasado automático

IMV ofrece una línea completa de sistemas de envasado para las bolsas GTB.

- Flexible: totalmente compatible con las bolsas GTB y las bolsas Mini GTB.

- Trazabilidad garantizada
- Higiénica: fácil de limpiar y con un uso optimizado de los consumibles.
- Fácil de usar y precisa (+/-1ml)
- Fiable

## GTB 1000<sup>TM 1</sup>

Máquina automática de llenado, sellado y etiquetado

## GTB 600<sup>TM 2</sup>

Máquina semi-automática de llenado y sellado

## GTB 250<sup>TM 3</sup>

Máquina manual de llenado y sellado.



