

Kineo Start

SISTEMA CASA PORTÁTIL

SIMPLIFIQUE A ANÁLISE SEMINAL

imv TECHNOLOGIES

Kineo Start

Kineo Start é um sistema compacto para análise seminal, desenvolvido como uma solução versátil tanto para a produção de doses de sêmen quanto para o controle de qualidade.

O equipamento auxilia na tomada de decisões durante o processamento das doses e garante a qualidade do sêmen antes da inseminação.

Especies:

- Suínos
- Equinos
- Bovinos
- Ovinos
- Caprinos



Sistema CASA portátil




Robusto e fácil de transportar

Processo simplificado de análise



Passo 1: Diluição da amostra.muestra.



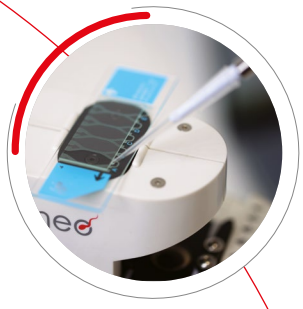

Passo 2: Preenchimento da lâmina Kineo sobre a platina aquecida.

- **Tecnologia de imagem com Inteligência Artificial (IA)**
- **Sistema de foco automático (sem necessidade de ajuste manual)**
- **Ajuste automático da iluminação**
- **Platina aquecida manual**



Passo 3: Análise seminal com o Kineo Start.

Resultados:

- Concentraçãoesper-mática
- Motilidade
- Motilidade progressiva

Cálculos:


- Número de doses
- Volume de diluente

Gestão de dados:

- Estatísticas
- Banco de dados de reprodutores

Desenvolvido para simplificar a rotina


1. Software intuitivo, desenvolvido com a participação de usuários de diversos países, incluindo médicos-veterinários, produtores e técnicos de laboratório.
2. Hardware fácil de operar, sem necessidade de ajustes.
3. Treinamento simplificado por meio de tutorial passo a passo e orientações integradas ao software.

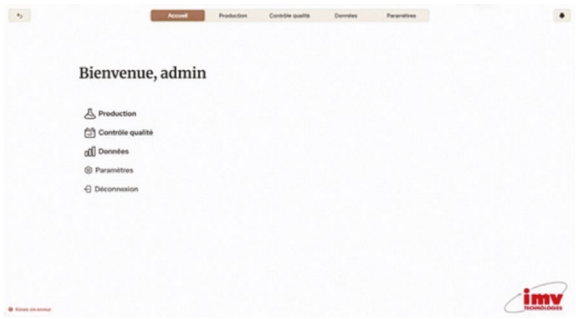

Resultados confiáveis


1. Nova tecnologia desenvolvida com mais de 50 anos de experiência técnica e baseada em parâmetros reconhecidos pelo setor.
2. Tecnologia potencializada por Inteligência Artificial, desenvolvida em parceria com especialistas de referência em pesquisa, proporcionando resultados confiáveis.
3. Resultados validados pelo Instituto Spallanzani.

CCC: concentração do Kineo Start em comparação com a concentração do NucleoCounter.
y = 0,974x | R^2 = 0,992 | CCC = 0,974 | n = 88.
Espécies: javali, garanhão I, garanhão N.

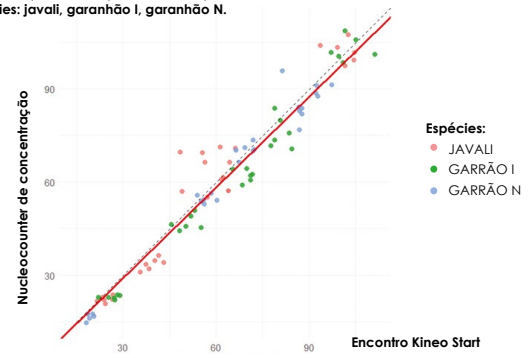

Comprove a qualidade das doses de sêmen e potencialize seu desempenho

1. Relatórios oficiais personalizáveis com a identidade visual da sua empresa para acompanhar os envios de sêmen e comprovar a qualidade das doses.
2. Acompanhe e compare o desempenho dos reprodutores para otimizar o manejo e melhorar a qualidade seminal.
3. Dados seguros e facilmente acessíveis sempre que necessário.

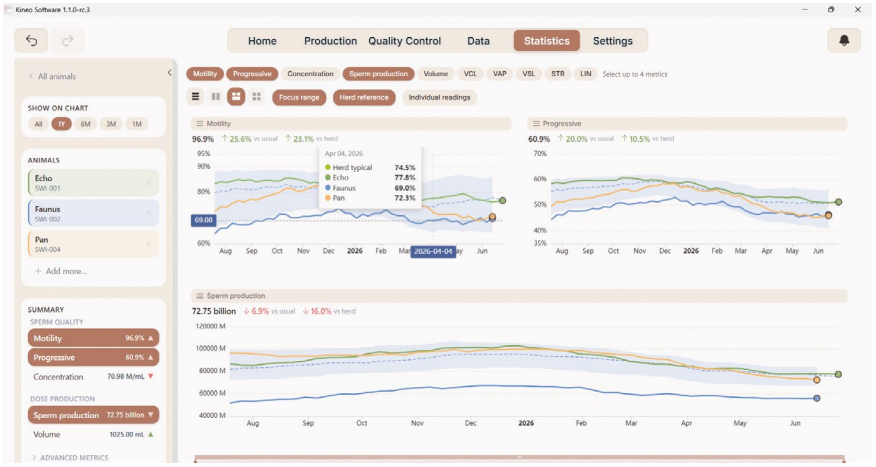

Especificações

Dimensões: 110W x 100D x 240H mm

Peso: 1.47 kg


Platina térmica
Control de temperatura: 37 °C ± 0,5 °C

Idiomas:
Francês, Inglês, Italiano, Chinês, Espanhol, Russo, Português, Japonês, Alemão e Vietnamita

Consumíveis compatíveis
Lâmina Kineo para 5 análises (Patente pendente)

Configurações mínimas requeridas:

- Intel® Core™ i5-1335U ou Celeron J6412 @ 2.60GHz
- Intel® Iris® Xe graphics ou maior
- 8 GB DDR4 de memória
- 500 GB M.2 SSD, PCIe NVMe (1 PC)
- Windows 10 ou mais
- 1 porta USB Tipo-C compatível com USB 3.0

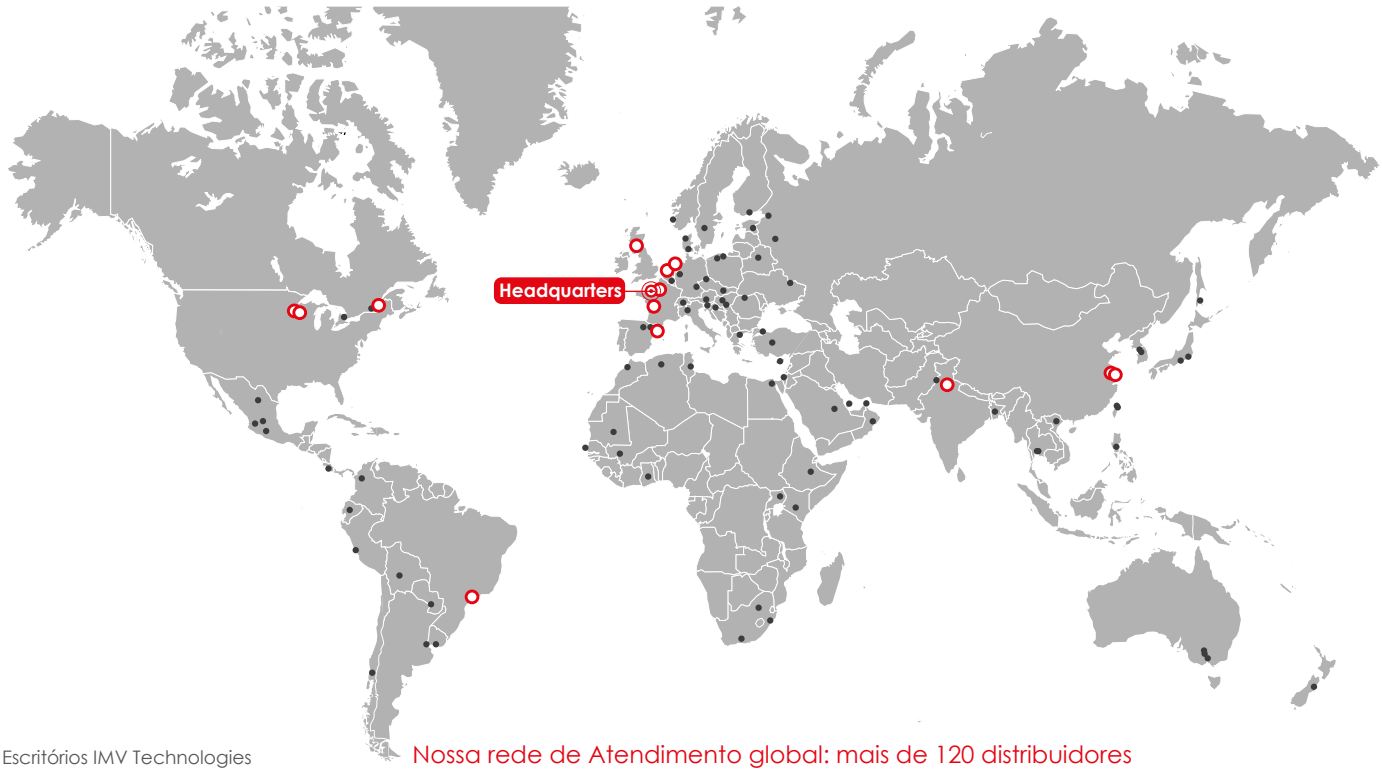

Escritórios IMV Technologies

Distribuidores

Nossa rede de Atendimento global: mais de 120 distribuidores

França

IMV Technologies Headquarters
+33 2 33 34 64 64
61300 - L'Aigle
welcome@imv-technologies.com

IMV imaging
16000 - Angoulême
france@imv-technologies.com

Polysem
78120 - Rambouillet
welcome@imv-technologies.com

Netherlands

Leja
Nieuw-Vennep - 2153 GN - North Holland
info@leja.nl

NIFA Technologies
Leeuwarden - 8938 AS - Friesland
www.nifa.nl

Escócia

IMV Technologies UK
Bellshill - ML4 3NJ - North Lanarkshire

Espanha

Imporvet
Barcelona - 08540 Centelles - Catalonia
int@import-vet.com

Estados Unidos

IMV Technologies USA
Brooklyn Park - 55445 - Minnesota
contact@imvusa.com

IMV Technologies USA
Rochester - 55901 - Minnesota
info@imvusa.com

Canadá

Ro-main
Saint-Lambert-de-Lauzon
G0S 2W0 - Quebec
info@ro-main.com

Brasil

IMV Technologies Brasil
Campinas - 13030-300 - Sao Paulo
contato@imvbrasil.com.br

China

IMV Technologies China
201203 - Shanghai
contact@imvchina.com

Nelson Techno Medical Co
Changzhou - Jiangsu - China
contact@imvchina.com

Índia

IMV Technologies India
Gurugram - 122016, Haryana
contact@imvindia.com

www.imv-technologies.br

Ref: 2026/01/05/A_PT